



Coda[®] シリーズ

活性炭と過マンガン酸カリウムが VOC (揮発性有機物) を取り除き、同時に HEPA フィルターが微細な粒子を除去

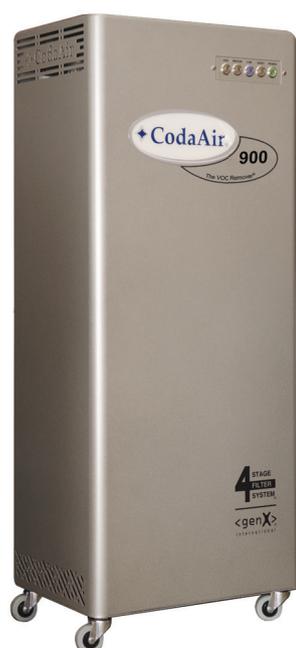

CodaAir[®] 900

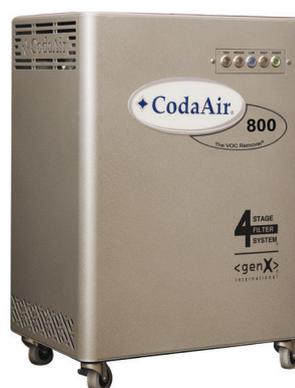

CodaAir[®] 800

仕様

製品番号	A900-009	A800-008
有効範囲：m ²	83 - 102	46 - 65
1 時間当たりの換気回数	5 - 25 回	4 - 22 回
奥行 x 幅 x 高：cm	30 x 46 x 114	30 x 46 x 66
重量：kg	34	24
フィルター交換推奨時期		6 ヶ月ごと
初回フィルター	付属	付属
半年交換フィルター	CAFK-900 (2 個セット)	GCAF-702 (2 個セット)

※風量調整可能 (4 段階)

Coda® Inline® 及び Xtra Inline® フィルター



Coda® Xtra Inline® Blue

- ・ヤシ殻活性炭を含有
- ・3ヶ月毎の交換を推奨
(6ヶ月まで使用できます)
- ・競合製品の20倍量の除去材を充填
- ・製品番号 CXBL-001



Coda® Xtra Inline® Green

- ・活性炭と AldaSorb® を配合
- ・3ヶ月毎の交換を推奨
(6ヶ月まで使用できます)
- ・競合製品の25倍量の除去材を充填
- ・製品番号 CXGR-001



Coda® Regular Inline® Purple

- ・改良型活性炭を含有
- ・2ヶ月毎の交換を推奨
(3ヶ月まで使用できます)
- ・設置面積を縮小してスペースに限りがある施設向け
- ・競合製品の10倍量の除去材を充填
- ・製品番号 CIPR-001

ORIGIO® Gas Line Filter

インキュベーター用ガスラインフィルター



活性炭の層状構造が、
圧倒的な表面積を確保
最大6か月のロングライフを実現

- ・層状に敷き詰められた含浸活性炭フィルターを採用し、VOC（揮発性有機物）を吸収する表面積を大幅に増加
- ・活性炭と過マンガン酸カリウムの2層構造で、物理的・化学的な両側面からのVOC除去機構を搭載
- ・下部にHEPAフィルターが内蔵され、ガス以外の異物を除去可能
- ・ワンタッチで取り換えが可能