


# BT37 MKII

## 加湿型ベンチトップインキュベーター

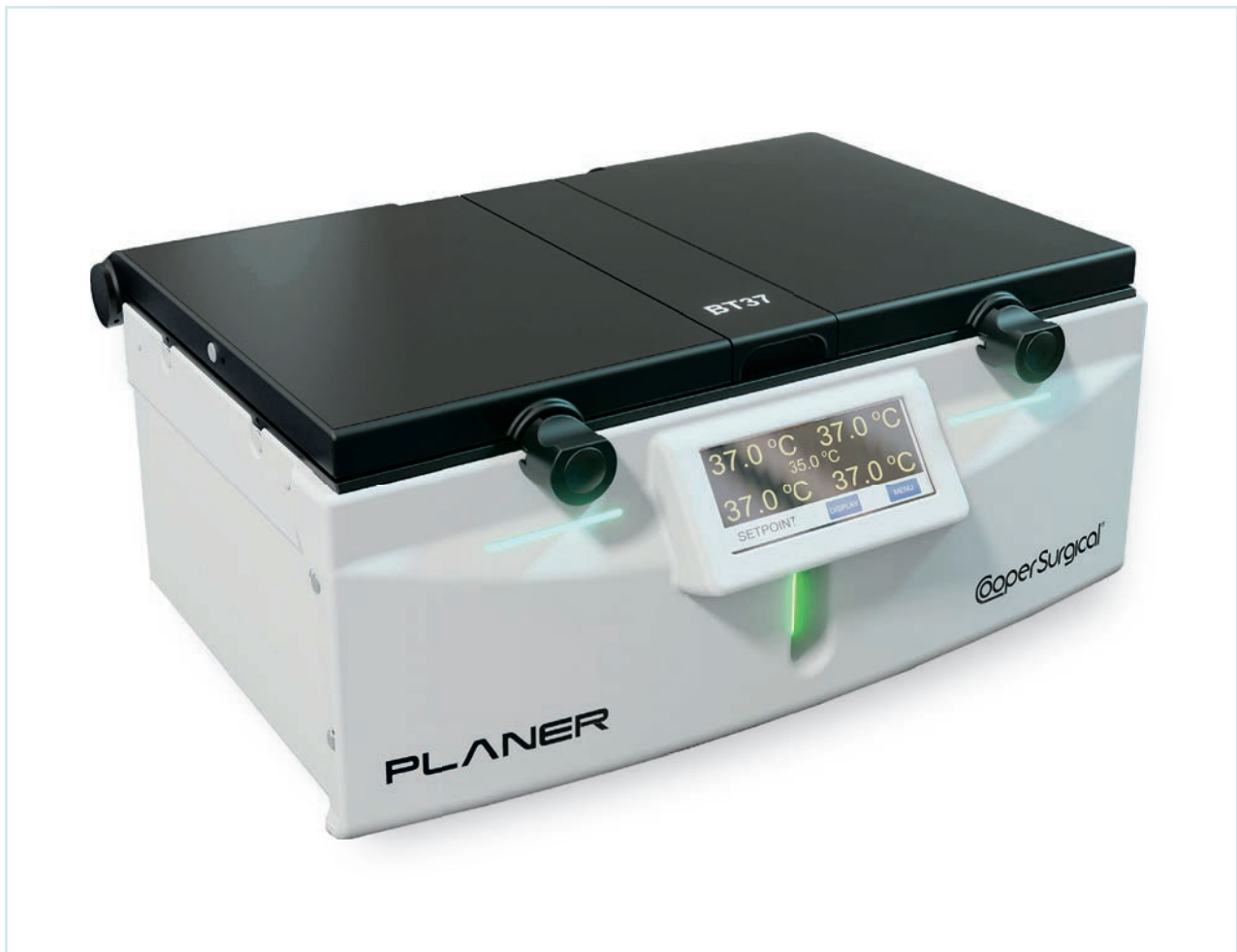


### 蓋の開け閉めから約7分 圧倒的な設定復旧能力が 成績に貢献

- ・ 混合ガス供給のためガス濃度センサーのドリフトが無く、校正の頻度を大幅に少なく運用可能
- ・ 加湿状態でも結露を殆ど発生させない機構のため、チャンバー内をクリーンに保つことが可能
- ・ 加湿・無加湿に対応
- ・ バッテリーを搭載し、停電時最大 2 時間まで動作可能
- ・ パルス制御によるガス供給により、開閉時のガス濃度復旧能力が高く、ガスの消費量の低減も実現



- ・ タッチスクリーンで、素早く簡単にコントロール
- ・ 一目で温度や警告を確認可能

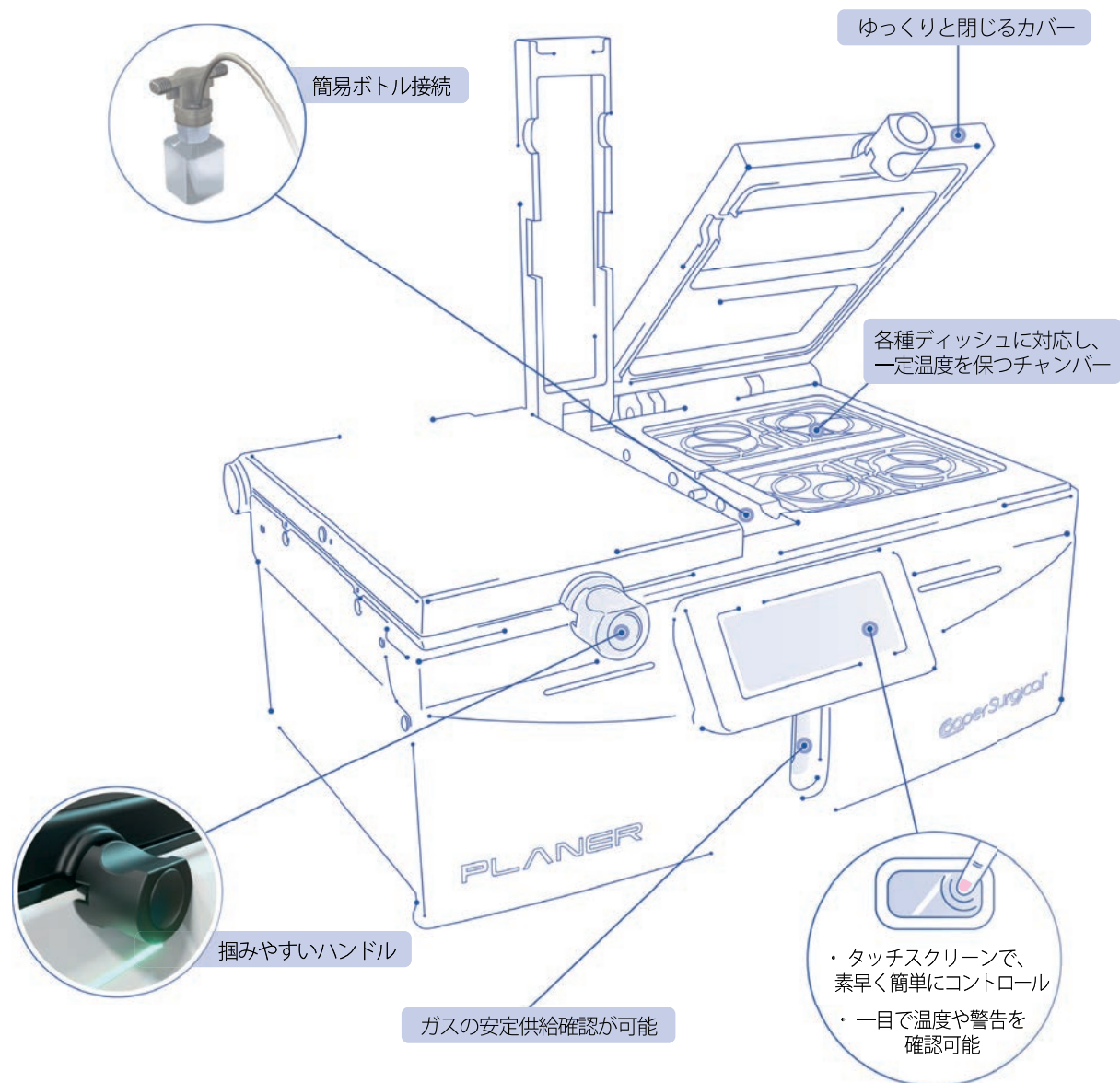

## 仕様

製品番号	BT37MKII
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	435 x 330 x 185 mm
チャンバー数	2
温度制御方式	PID 制御
ガス制御方式	パルス制御
使用ガス	混合ガス
重量	17 kg
電源仕様	100 V、Max 2 A、50/60 Hz