

# G185

## 10+1チャンバードライインキュベーター

---



### ドライインキュベーターのベストセラー

- ・ 10+1チャンバーの個別チャンバー
- ・ より良い培養環境を実現するガス供給システム
- ・ Data Loggingソフトウェア付属


## 10+1チャンバーの個別チャンバー

G185には、10チャンバーの個別チャンバーが搭載されており、検体ごとの個別培養環境を提供します。また、加温ができるチャンバーを1つ持ち、培養液の加温等に利用できます。



## より良い培養環境を実現するガス供給システム

G185で利用されるガスは、各チャンバーにガスが供給された後、再度マニフォールド内に戻り、再度設定濃度に調整された後にチャンバーに供給されます。これにより、従来の培養器よりもガスの消費量を大幅に少なくすることが可能です。

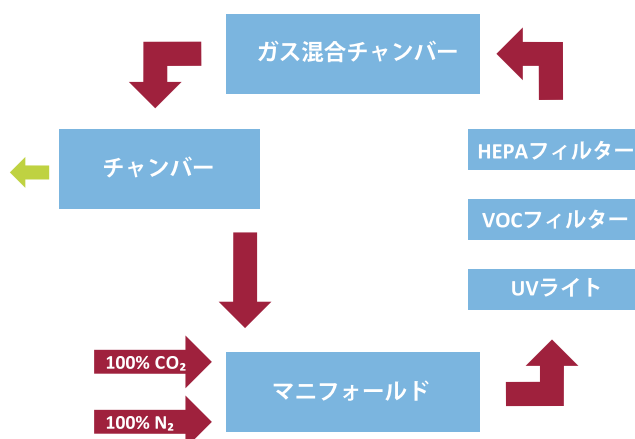

## Data Loggingソフトウェア付属

Windows OSで動作するデータロガーが付属しています。ガス濃度や温度等の記録を経時的に保存可能です。緊急時にはアラームを発報する機能も搭載されています。

## 仕様

	ドラインキュベーター G185
製品番号	G185
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)	920 x 558 x 152 (mm)
重量	38 kg
電源仕様	200 W、100 - 120 VAC、50/60 Hz
制御温度	35~42 °C
使用ガス	CO <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub>
フィルター (HEPA/ VOC)	専用フィルター K-730
ソフトウェア	Data Logger