

L Series

IVF用垂直気流式クリーンベンチ




培養室にも優れたデザインを

- 空気清浄度Class100
- 開口が大きい前面フード（開口固定式）
- 多くのサイズバリエーション (946 ~ 1846 mm)
- 要望に応じたカスタムに対応

清浄度Class 100

作業に影響を与えないために、気流設計を厳密に最小限度の気流でチャンバー内の清浄度をClass 100に保つことが可能です。動作音量も非常に低く抑えられており、作業者の作業環境を改善します。

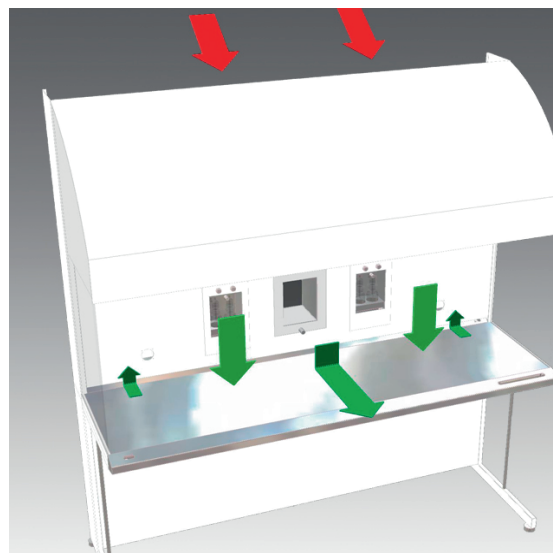

開口が大きい前面フード（開口固定式）

常に安定した気流でチャンバーの清浄度を保つため、前面フードは開口固定式を採用しています。フードの開口度による気流の流量変化がありません。



多くのサイズバリエーション (1246 ~ 1846 mm)

ラボのスペースに合わせて、1246 ~ 1846 mm 幅のクリーンベンチをご用意しています。


L124 1246mm	L125 1546mm	L126 1846mm
		

ご希望に応じたカスタム対応

数多くの製品オプションから、必要な機能を選択していただくことが可能です。



モニター

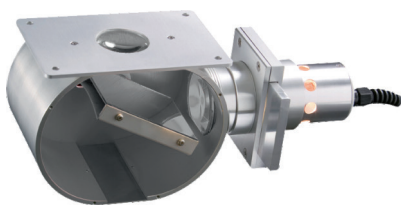


顕微鏡光源（ハロゲン・LED）



クリーンベンチPCラック



引き出し式キーボードラック

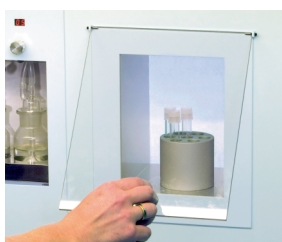

パスボックス

クリーンベンチ（顕微鏡埋込非対応）

	125cm	155cm	185cm
製品番号	L124	L125	L126
外形寸法(幅x奥行x高, mm)	1246x735x2020	1546x735x2020	1846x735x2020
作業エリア寸法(幅x奥行, mm)	1226 x 500	1526 x 500	1826 x 500
テーブル高 (mm)	835 ~ 860	835 ~ 860	835 ~ 860
重量	185 kg	240 kg	250 kg
チャンバー内電源口数	2 口	2 口	2 口
電源仕様	552W Max 115VAC 50/60Hz	552W Max 115VAC 50/60Hz	988W Max 115VAC 50/60Hz

クリーンベンチ（顕微鏡等非搭載）

	125cm 実体顕微鏡組込	125cm 除振台組込	155cm 実体顕微鏡組込	185cm 実体顕微鏡組込	185cm 実体x倒立組込
製品番号	L124IVF	L124ICSI	L125IVF	L126IVF or Dual	L126MP
外形寸法(幅x奥行x高, mm)	1246x735x2020	1246x735x2020	1546x735x2020	1846x735x2020	1846x735x2020
作業エリア寸法(幅x奥行, mm)	1226 x 500	1226 x 500	1526 x 500	1826 x 500	1826 x 500
テーブル高 (mm)	835 ~ 860	835 ~ 860	835 ~ 860	835 ~ 860	835 ~ 860
重量	205 kg	196 kg	259 kg	272 kg	262 kg
チャンバー内電源口数	2 口	2 口	2 口	2 口	2 口
付加機能	ヒートステージ ヒートガラス 加湿ガス供給機能 顕微鏡位置左右選択 +オプション	除振機構	ヒートステージ ヒートガラス 加湿ガス供給機能 顕微鏡位置左右選択 +オプション	ヒートステージ ヒートガラス 加湿ガス供給機能 顕微鏡位置左右両選択 +オプション	除振機構 ヒートステージ ヒートガラス 加湿ガス供給機能 +オプション
電源仕様	552W Max 115VAC 50/60Hz	988W Max 115VAC 50/60Hz	552W Max 115VAC 50/60Hz	988W Max 115VAC 50/60Hz	988W Max 115VAC 50/60Hz